

JLU KOREA
PROFESSIONAL SKIN CARE SYSTEM

PRODUCT- CATALOG

2021 NEW PRODUCT LAUNCH




Company Introduction...

JLU Co., Ltd. is a company specializing in beauty equipment and medical device established in 2013, and always strives to fulfill customer satisfaction regarding health and beauty as its top priority. We will continue to listen to our customers and promise to provide better products and services through steady R&D. Furthermore, we will grow into a core company in the beauty and medical device industry by going beyond the domestic market and entering overseas markets. Thank you.


JLU Co., Ltd. CEO KIM GI SOO

고객의 건강과 아름다움을 위해 노력하는 기업 (주)제이엘유는 2013년 설립한 미용기기 및 의료기기 전문 업체로 항상 고객의 건강과 아름다움을 최우선으로 고객 만족을 실현하기 위해 노력하고 있습니다. 앞으로도 고객의 말씀에 귀 기울여 꾸준한 연구개발을 통한 제품 생산과 더 나은 서비스를 제공할 것을 약속합니다. 더 나아가 국내시장을 넘어 해외 진출로 미용·의료기기 산업의 핵심기업으로 성장할 것입니다. 감사합니다.

World Wide Distributors...

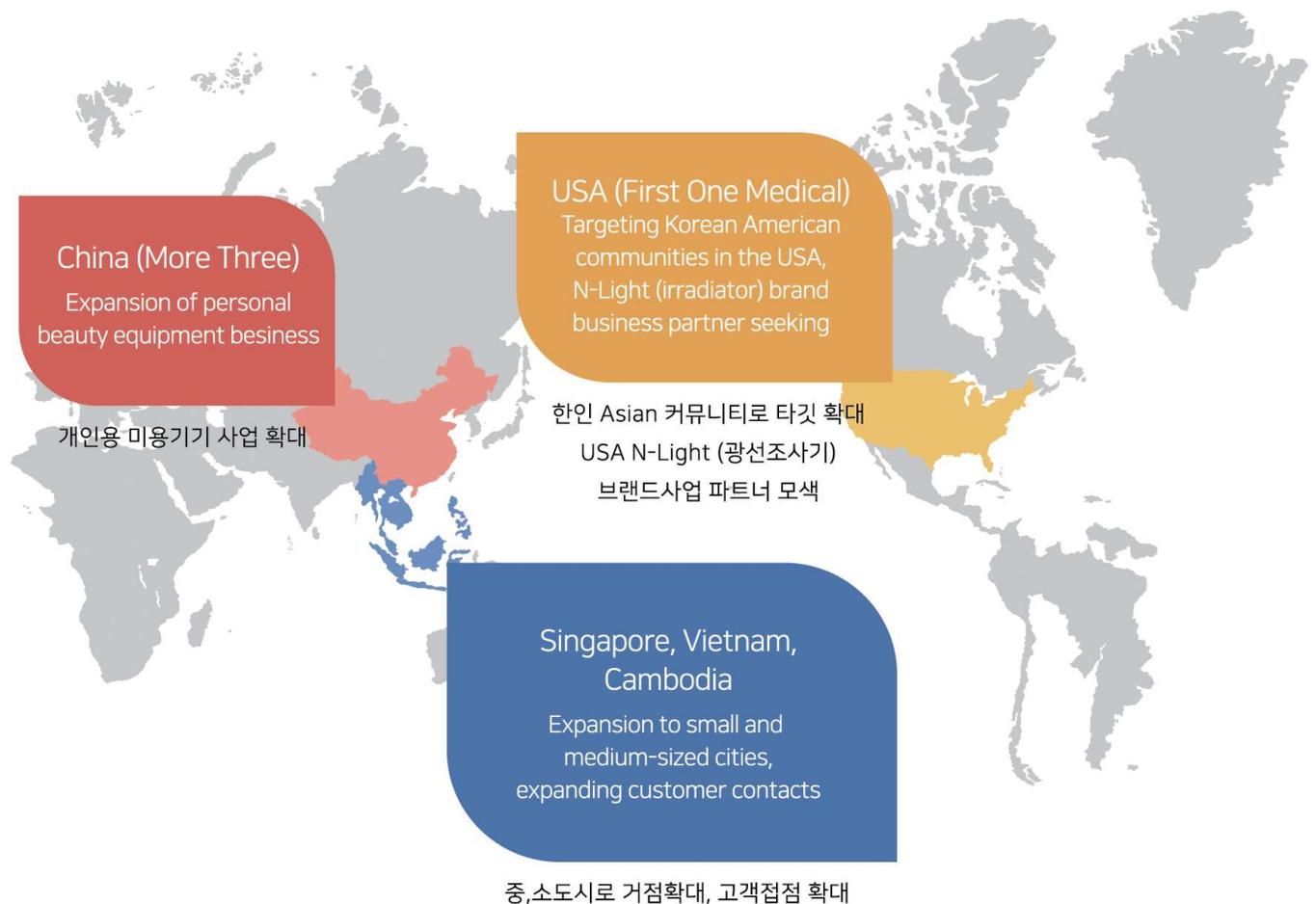

Certificate...




아이콜 플러스 KC인증
I Cool Plus KC certification



아이콜 플러스+KC인증
I Cool Plus +KC certification



아이콜 플러스 윈 KC인증
I Cool Plus WIN KC certification

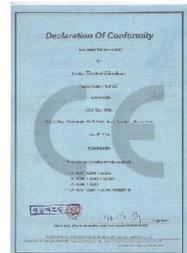


i-COOL 유럽 CE 인증서
i-COOL CE Certificate



Auto MTS KC인증
Auto MTS KC certification



하이소닉 CE인증
HYSONIC
skincare
CE certification

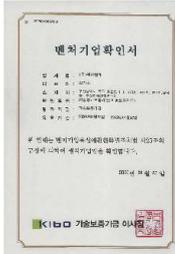

벤처기업 확인서
Venture Company
Certification



의료기기 품질경영 시스템 인증서 (ISO)
Factory Registration
Certificate



의료기기 제조 및
품질관리 기준 적합증명서 (GMP)
Medical Device
Manufacturing and
Quality Control
Standard certificate
(GMP)



공장 등록증
R&D department
certificate



의료기기 제조업 허가증
Medical Device
Manufacturing
Business License



의료기기 제조 허가증
Medical Device
Manufacturing
License



01



2021 NEW MODEL

HYSO NIC

IOT



HIFU



SONO



COOLING
& HEATING



PLASMA



RF



BLT



01 HAND PIECE HYSONIC IOT

고강도의 초음파 에너지를 하나의 초점으로 집약해 피부 안쪽을 자극해 수술 없이 주름 개선과 콜라겐 생성, 리프팅 효과 등을 기대할 수 있습니다.

Combines high-intensity ultrasound energy focus on one point and stimulates the inside of the skin to expect wrinkle improvement, collagen production, and lifting effects without any skin procedure and surgery

HIFU

1.5/3.0/4.5/6.0
(mm)



네 가지 다른 파장의 QUAD SONO. 피부 속 깊이 자리 잡은 염증형 피부 컨디션 개선에 적용 시 도움이 됩니다.

Quad SONO of four different wavelengths. It helps to improve inflammatory skin condition deeply embedden in the skin


SONO

1.0/3.0/10.0/17.0
(Mhz)



-15°C ~ 45°C 냉온으로 재생과 진정에 도움을 줍니다.
Rejuvenate and calm down the skin by temperature changes

COOLING & HEATING

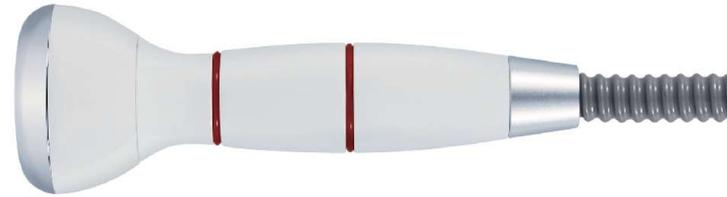

영양분이 피부 속 깊숙히 투입되도록 도움을 줍니다.
Ion injection deeply nourishes the skin


ION ROD



표피와 진피 상부층을 동시에 공략하는 핀 고주파.
피부 내부에서 열을 발생 시켜 혈액순환 촉진에 도움을 줍니다.

The high frequency promotes blood circulation by generating heat in dermis and epidermis layers

RF

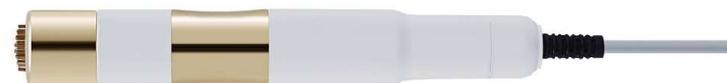

묵은 각질, 블랙헤드, 모공속 먼지 제거에 도움을 줍니다.
Remove old dead skin cell, blackheads, and dust in the pores.

BLT



플라스마를 생성하여 표피 내 외부에 존재하는 세균을 살균하여 피부 컨디션 개선에 도움이 됩니다.

It helps to improve skin condition by sterilizing bacteria that exist inside and outside of the epidermis by generating plasma.

PLASMA



HYSONIC IOT



주름개선 Electrothermal perforation

집약된 초음파로 피부 안쪽을 자극해 수술과 통증 없이 주름 개선을 기대 할 수 있습니다.

Concentrated ultrasound improve wrinkles by skin stimulation in non surgical way and any pain

피부탄력 증가 an increase in skin elasticity

피부 내부에서 콜라겐생성을 증가 시켜 피부 탄력을 높여 탄탄한 피부를 만드는 것을 기대할 수 있습니다.

Concentrated ultrasound helps to improve wrinkles by stimulating skin from the inside without any pain and surgical invasion

피부 컨디션 개선 improvement of skin condition

초음파를 이용하여 피부 속 트러블들로 인한 망가진 컨디션 개선에 도움이 됩니다.

Concentrated ultrasound helps to improve the damaged skin condition and skin troubles

크라이오 효과 Cryo effect

-15°C에서 45°C까지 온도조절 가능 피부 진정 효과 및 피부 마사지 효과 피부층의 수축 및 이완을 통한 피부 탄력 증가

Temperature can be controlled from -15°C to 45°C that gives skin soothing effect and increase skin elasticity through contraction, massaging and relaxation of the skin layers.

2021 NEW
MODEL

MODERN BEAUTY EQUIPMENT



Product specification

Rated voltage and frequency : AC 110 ~ 240V
Electricity consumption : 180W

Hifu output frequency : 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 MHZ
Ultrasonic output frequency : 1.3, 10, 17 MHZ

Weight : 10Kg

Output time : Not more than 70ms

Size : (W)430mm
(L)260mm
(H)170mm



hysonic inc

JLU KOREA

HYSONIC



HIFU



SONO



SONO



02 HAND PIECE HYSONIC

고강도의 초음파 에너지를 하나의 초점으로 집약해 피부 안쪽을 자극해 수술 없이 주름 개선과 콜라겐 생성, 리프팅 효과 등을 기대할 수 있습니다.

By concentrating high-intensity ultrasound energy into one focus, it stimulates the inside of the skin that improves wrinkles, stimulates collagen production, and provides lifting effects without surgical invasion

HIFU

1.5
3.0
4.5
6.0
(mm)



두 가지 다른 파장의 DUAL SONO. 피부 속 깊이 자리 잡은 염증 형 피부 컨디션 개선에 적용 시 도움이 됩니다.

Dual SONO with two different wavelengths helps to improve the condition of the inflammatory skin

SONO

1.0
3.0
(MHz)



두 가지 다른 파장의 DUAL SONO. 피부 속 깊이 자리 잡은 염증 형 피부 컨디션 개선에 적용 시 도움이 됩니다.


Dual SONO with two different wavelengths helps to improve the condition of the inflammatory skin

SONO

3.0
10.0
(MHz)



HYSONIC

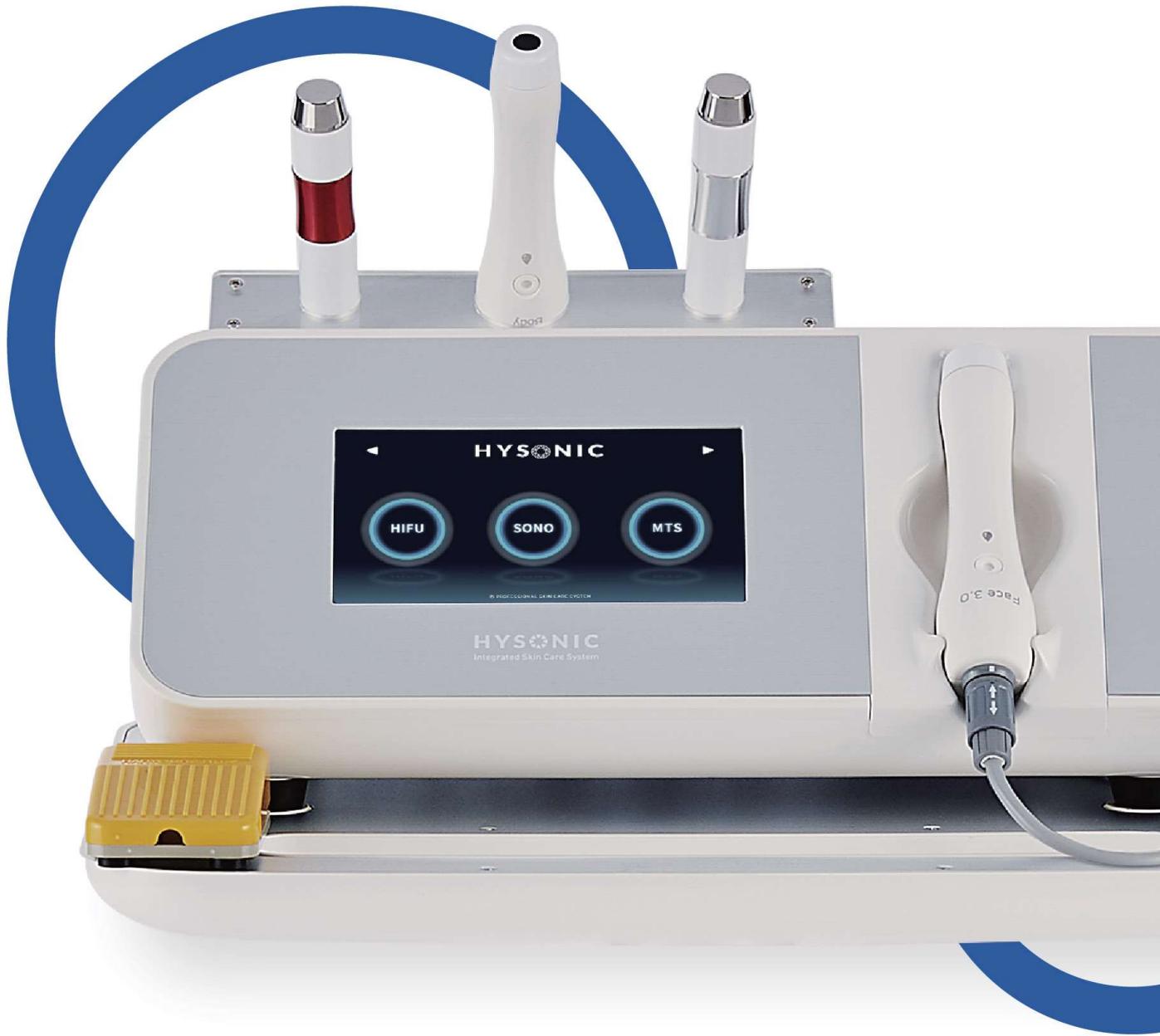

주름개선 Electrothermal perforation

집약된 초음파로 피부 안쪽을 자극해 수술과 통증 없이 주름 개선을 기대 할 수 있습니다.

Concentrated ultrasound improve wrinkles by skin stimulation in non surgical way and any pain

피부탄력 증가 an increase in skin elasticity

피부 내부에서 콜라겐생성을 증가 시켜 피부 탄력을 높여 탄탄한 피부를 만드는 것을 기대할 수 있습니다.

Concentrated ultrasound helps to improve wrinkles by stimulating skin from the inside without any pain and surgical invasion

피부 컨디션 개선 improvement of skin condition

초음파를 이용하여 피부 속 트러블들로 인한 망가진 컨디션 개선에 도움이 됩니다.

Concentrated ultrasound helps to improve the damaged skin condition and skin troubles

MODERN BEAUTY EQUIPMENT



Product specification

Rated voltage and frequency : AC 110 ~ 240V
Electricity consumption : 180W

Hifu output frequency : 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 MHZ
Ultrasonic output frequency : 1.3.10.17 MHZ

Weight : 6Kg

Output time : Not more than 70ms

Size : (W)430mm
(L)260mm
(H)170mm



ICOOOL PLUS+ WIN



전기천공법 Electroporation

피부층에 짧은 순간 전압을 줌으로써 피부에 일시적인 구멍을 만들어 진피층까지 유효성분을 투입시키는 방법

A method of injecting active ingredients into the dermis layer by making a temporary hole in the skin by applying a short instantaneous voltage to the skin.

피부탄력 증가 an increase in skin elasticity

피부 내부에서 콜라겐생성을 증가 시켜 피부 탄력을 높여 탄탄한 피부를 만드는 것을 기대할 수 있습니다.

The stimulation of collagen production increases the skin elasticity making it firm.

각질제거 Exfoliation

탈락하지 못한 각질과 블랙헤드, 모공 속 미세먼지 제거를 도와줍니다.

It helps to remove dead skin cells, blackheads, and dust from pores.

크라이오 효과 Cryo effect

-15°C에서 45°C까지 온도조절 가능 피부 진정 효과 및 피부 마사지 효과 피부층의 수축 및 이완을 통한 피부 탄력 증가


Temperature can be controlled from -15°C to 45°C that gives skin soothing effect and increase skin elasticity through contraction, massaging and relaxation of the skin layers.

03 HAND PIECE ICOOL PLUS WIN

-15°C ~ 45°C 냉온으로 재생과 진정에 도움을 줍니다.

Rejuvenate and calm down the skin by temperature changes

**COOLING
& HEATING**

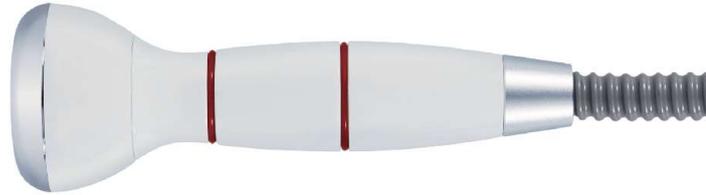

영양분이 피부 속 깊숙히 투입되도록 도움을 줍니다.

Ion injection deeply nourishes the skin

ION ROD



유효성분을 피부 깊숙히 침투하여 흡수하는데 도움을 줍니다.

Ion clip for skin nourishment

Auto MTS



묵은 각질, 블랙헤드, 모공속 먼지 제거에 도움을 줍니다.

Remove old dead skin cell, blackheads, and dust in the pores.

SCRUBBER



고강도의 초음파 에너지를 하나의 초점으로 집약해 피부 안쪽을 자극해 수술 없이 주름 개선과 콜라겐 생성, 리프팅 효과 등을 기대할 수 있습니다.

By concentrating high-intensity ultrasound energy into one focus, it stimulates the inside of the skin that improves wrinkles, stimulates collagen production, and provides lifting effects without surgical invasion

**HIFU
4.0
(MHz)**



Product specification

Rated voltage and frequency : AC 110 ~ 240V

Electricity consumption : 180W

Weight : 6Kg

Output time : Not more than 70ms

Size : (W)420mm

(L)249mm

(H)162mm



icool plus

ICOOOL PLUS +

04



전기천공법 Electroporation

피부층에 짧은 순간 전압을 줌으로써 피부에 일시적인 구멍을 만들어 진피층까지 유효성분을 투입시키는 방법

A method of injecting active ingredients into the dermis layer by making a temporary hole in the skin by applying a short instantaneous voltage to the skin.

피부탄력 증가 an increase in skin elasticity

피부 내부에서 콜라겐생성을 증가시켜 피부 탄력을 높여 탄탄한 피부를 만드는 것을 기대할 수 있습니다.

The stimulation of collagen production increases the skin elasticity making it firm.

각질제거 Exfoliation

탈락하지 못한 각질과 블랙헤드, 모공 속 미세먼지 제거를 도와줍니다.

It helps to remove dead skin cells, blackheads, and dust from pores.

크라이오 효과 Cryo effect

-15°C에서 45°C까지 온도조절 가능 피부 진정 효과 및 피부 마사지 효과 피부층의 수축 및 이완을 통한 피부 탄력 증가


Temperature can be controlled from -15°C to 45°C that gives skin soothing effect and increase skin elasticity through contraction, massaging and relaxation of the skin layers.

04 HAND PIECE ICOOL PLUS+

-15°C ~ 45°C 냉온으로 재생과 진정에 도움을 줍니다.

Rejuvenate and calm down the skin by temperature changes

**COOLING
& HEATING**

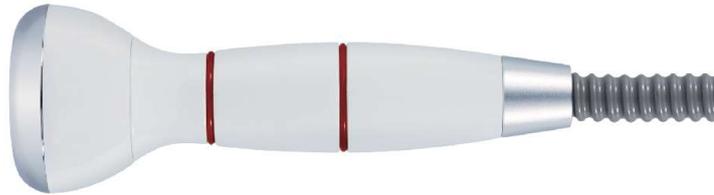

영양분이 피부 속 깊숙히 투입되도록 도움을 줍니다.

Ion injection deeply nourishes the skin

ION ROD



이온을 이용하여 피부 영양분 흡수에 도움을 줍니다.

Ion clip for skin nourishment

VITAMIN CLIP



묵은 각질, 블랙헤드, 모공속 먼지 제거에 도움을 줍니다.

Remove old dead skin cell, blackheads, and dust in the pores.

SCRUBBER



초음파 순환 촉진 마사지로 피부 컨디션 개선에 도움을 줍니다.

Ultrasonic cyclic-promoting Massage

**SONO
1.0
(MHz)**



Product specification

Rated voltage and frequency : AC 110 ~ 240V

Electricity consumption : 180W

Weight : 6Kg

Output time : Not more than 70ms

Size : (W)420mm

(L)249mm

(H)162mm



icool plus

ICOOOL

05



전기천공법 Electroporation

피부층에 짧은 순간 전압을 줌으로써 피부에 일시적인 구멍을 만들어 진피층까지 유효성분을 투입시키는 방법

A method of injecting active ingredients into the dermis layer by making a temporary hole in the skin by applying a short instantaneous voltage to the skin.

크라이오 효과 Cryo effect


-15°C에서 45°C까지 온도조절 가능
피부 진정 효과 및 피부 마사지 효과
피부층의 수축 및 이완을 통한
피부 탄력 증가

Temperature can be controlled from -15°C to 45°C that gives skin soothing effect and increase skin elasticity through contraction, massaging and relaxation of the skin layers.

05 HAND PIECE ICOOL

-15°C ~ 45°C 냉온으로 재생과 진정에 도움을 줍니다.
Rejuvenate and calm down the skin by temperature changes

**COOLING
& HEATING**

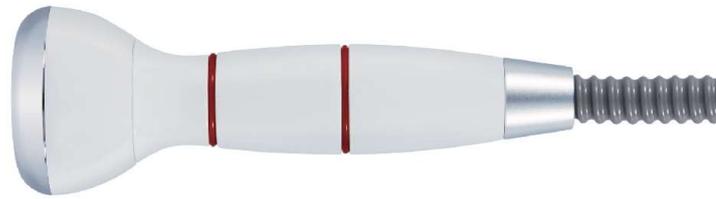

영양분이 피부 속 깊숙히 투입되도록 도움을 줍니다.
Ion injection deeply nourishes the skin

ION ROD



Product specification
Rated voltage and frequency : AC 110 ~ 240V
Electricity consumption : 180W

Weight : 6Kg

Output time : Not more than 70ms
Size : (W)420mm
(L)249mm
(H)162mm



icool



부산광역시 북구 효열로 111
부산지식산업센터 4층 410~412호
(Room 410~412, 111, Hyoyeol-ro, Buk-gu, Busan, Korea)

E mail - jlukorea@naver.com

Home page - www.jlu.kr

Instagram - https://www.instagram.com/jlu_korea_official/

Youtube - <https://www.youtube.com/channel/UCLUXC5dg4cKZkJxFNPHiQaw/videos>

Naver blog - <https://blog.naver.com/jlukorea>

Number - +82 51-331-7185

FAX - +82 51-331-7187